

Unison UK-C18


Cadenza CD-C18

250 x 4.6 mm

HPLC COLUMN APPLICATION

1,4-bis [2- (9-ethylcarbazol-3-yl) vinyl] benzene
(Organic light-emitting diode material)

1,4-ビス [2-(9-エチルカルバゾール -3-イル) ビニル] ベンゼン
(有機エレクトロルミネッセンス材料)

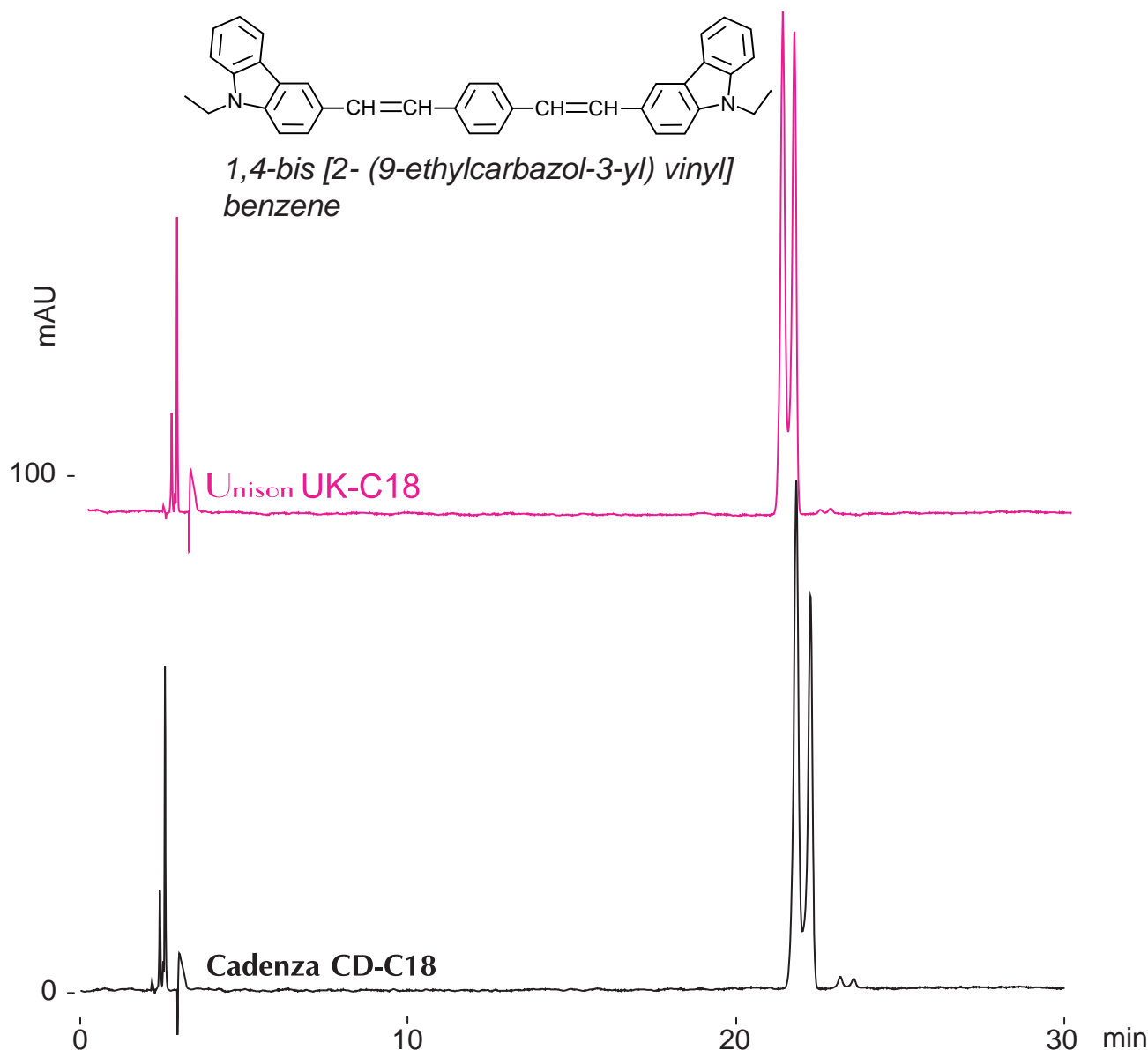

250 x 4.6 mm

A: water / acetonitrile / formic acid = 50 / 50 / 0.1

B: acetonitrile / formic acid = 100 / 0.1

60-100%B (0-30min)

1.0mL/min (8MPa), 60°C, 260nm

10µL (0.05mg/mL, THF / formic acid = 100 / 1)